

Datum: 2020-05-25

Innehållsansvarig	Linda Hultberg	Version	2
Godkänd/beslutat av	Lena Serrander	Dokumenttyp	Rutin

Provtagningsanvisning - SARS-CoV-2 RNA

Information om provtagning

Nasopharynx

Prov tas med ESwab nasofarynx, blå kork, vuxna/barn, ESwab pediatrik för mindre barn alternativt nytt provtagningskit med pinne och transsportrör innehållande transportmedium.

Tryck upp patientens nästipp något. Rikta provtagningspinnen horisontellt, för in den så långt bak i nasofarynxområdet som möjligt och låt den ligga kvar ca 10 sekunder mot bakre farynxväggen. För därefter ner pinnen i röret med transportmedium, blanda noga. Pressa pinnen mot rörets vägg, tag upp pinnen ur röret och kasta den sedan som konventionellt avfall.

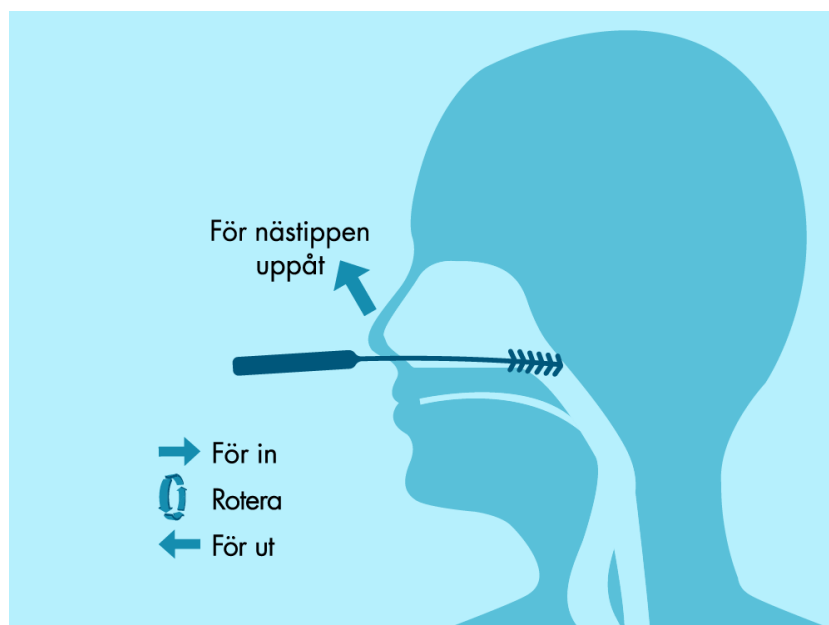


Bild från Region Dalarna

Transport

Provet bör transporteras till klinisk mikrobiologi inom 24 timmar.

Svarsrutiner

Svar på PCR-analysen kan lämnas inom 1-3 dagar.

Coronavirus SARS-CoV-2 svaras ut som ej påvisat/PÅVISAT.