
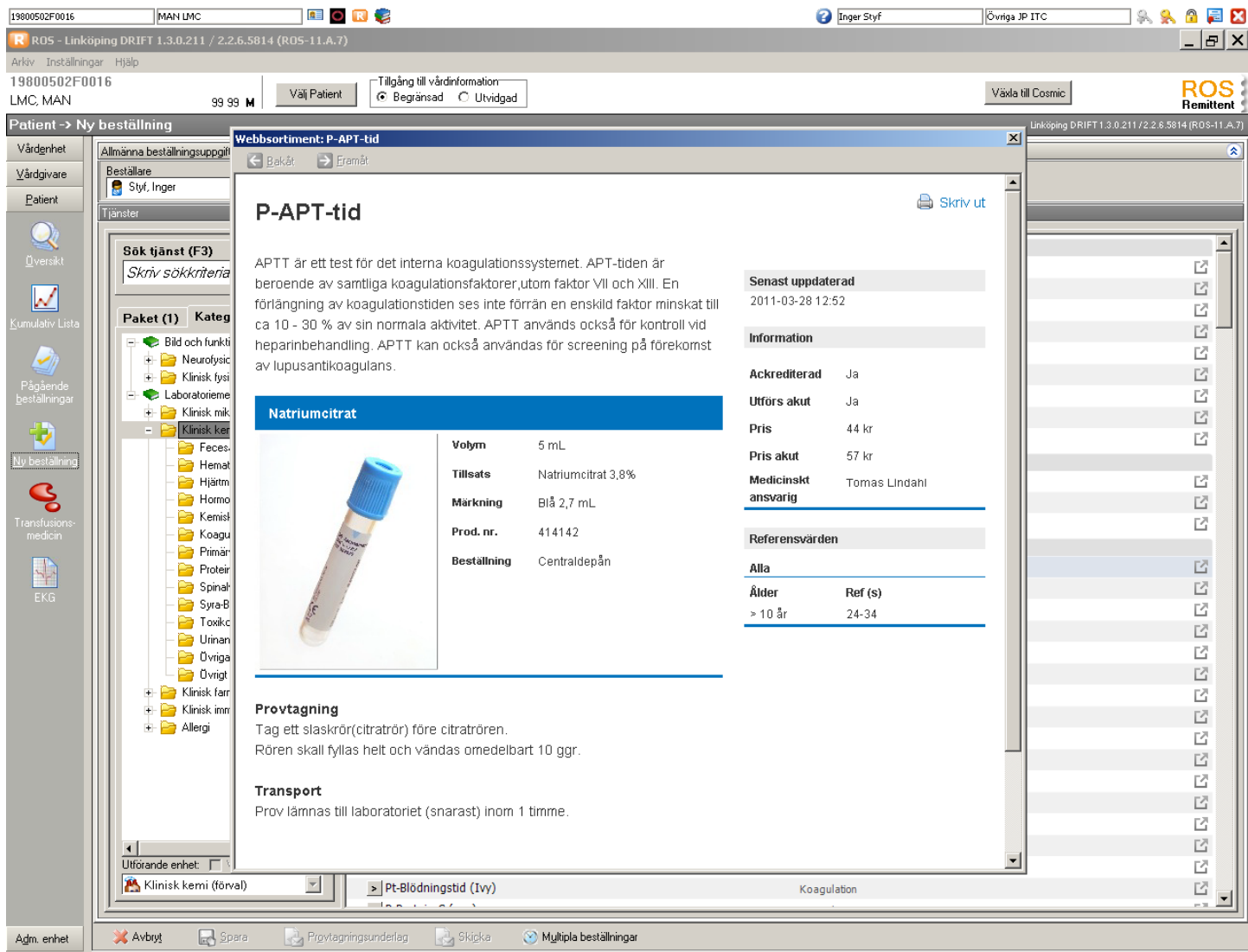


Koppling till provtagningsanvisningar för laboriemedicin i ROS

Uthopp till laboriemedicins provtagningsanvisningar görs genom att klicka på  till höger i bilden. Provtagningsanvisningar, laboriemedicin nås också via genvägar på Lisa eller under P, A-Ö



19800502F0016 MAN LMC Inger Styf Övriga JP ITC

ROS - Linköping DRIFT 1.3.0.211 / 2.2.6.5814 (ROS-11.A.7)

Arkiv Inställningar Hjälp

19800502F0016 LMC, MAN 99 99 M Välj Patient Tillgång till vårdinformation: Begränsad Utvidgad Växla till Cosmic ROS Remittent

Patient -> Ny beställning

Vårdenhet Vårdgivare Patient

Översikt Kumulativ Lista Pågående beställningar Ny beställning Transfusionsmedicin EKG

Allmänna beställningsuppgifter

Beställare Styf, Inger

Tjänster

Sök tjänst (F3) Skriv sökkriterier

Paket (1) Kateg

- Bild och funkti
 - Neurofysic
 - Klinisk fysi
 - Laboriemedic
 - Klinisk kem
- Feces-
- Hemat
- Hjärtm
- Hormo
- Kemist
- Koagu
- Primär
- Proteir
- Spinal
- Syra-B
- Toxik
- Urinan
- Övriga
- Övrigt
- Klinisk farr
- Klinisk immr
- Allergi

Webbsortiment: P-APT-tid

Bakåt Framåt

P-APT-tid

Skriv ut

APTT är ett test för det interna koagulationssystemet. APTT-tiden är beroende av samtliga koagulationsfaktorer, utom faktor VII och XIII. En förlängning av koagulationstiden ses inte förrän en enskild faktor minskat till ca 10 - 30 % av sin normala aktivitet. APTT används också för kontroll vid heparinbehandling. APTT kan också användas för screening på förekomst av lupusantikoagulans.

Senast uppdaterad 2011-03-28 12:52

Information

Ackrediterad Ja

Utförs akut Ja

Pris 44 kr


Pris akut 57 kr

Medicinskt ansvarig Tomas Lindahl

Referensvärden

Alla	Ålder	Ref (s)
	> 10 år	24-34

Natriumcitrat



Volym 5 mL

Tillsats Natriumcitrat 3,8%

Märkning Blå 2,7 mL

Prod. nr. 414142

Beställning Centraldepån

Provtagning

Tag ett slaskrör (citratrör) före citratrören. Rören skall fyllas helt och vändas omedelbart 10 ggr.

Transport

Prov lämnas till laboratoriet (snarast) inom 1 timme.

Utförande enhet: Klinisk kemi (förval) Pt-Blödningstid (Ivy) Koagulation

Avbryt Spara Provtagningsunderlag Skicka Multipla beställningar